


Dépistage du cancer du côlon avec Cologuard®

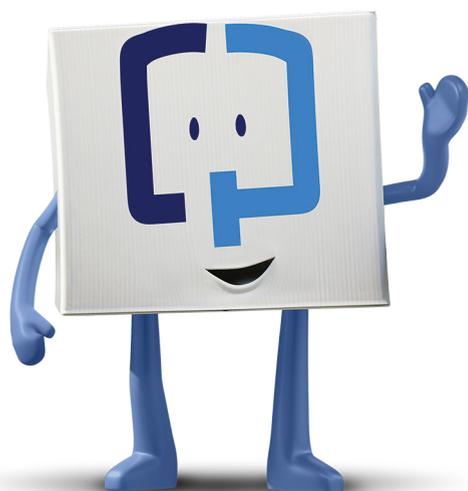


cologuard®
by EXACT SCIENCES

Cologuard est conçu pour le dépistage des adultes âgés de 45 ans et plus qui présentent un risque modéré de cancer colorectal. Rx seulement.

Veuillez consulter les informations importantes sur les risques au dos de la brochure.

Prenez votre santé en main grâce au dépistage du cancer du côlon

Le cancer du côlon touche toutes les races, tous les sexes et toutes les ethnies¹

3^e

Il s'agit du 3^e cancer le plus fréquent chez les hommes et les femmes, et il est souvent considéré comme la forme de cancer la plus évitable, mais la moins prévenue^{2,5}

45+

En raison de l'augmentation du nombre de cas de cancer du côlon chez les personnes de moins de 50 ans, l'American Cancer Society recommande désormais de commencer le dépistage dès l'âge de 45 ans³

90 %

N'oubliez pas cette recommandation. Parce que lorsqu'il est détecté à un stade précoce, le cancer du côlon est traitable chez environ 90 %* des personnes⁴

C'est pourquoi un dépistage régulier devrait faire partie de vos examens de santé habituels !

*Basé sur la survie à 5 ans.

résultats

Votre professionnel de santé vous communiquera votre résultat environ 2 semaines après la réception de l'échantillon au laboratoire

Sachez que Cologuard dépiste les **altérations de l'ADN** et du **sang** dans les selles, et que vos résultats seront donc basés sur ces marqueurs⁵



Un résultat négatif signifie que le test n'a pas détecté ces signes potentiels. Il est peu probable que vous ayez un cancer colorectal^{5,6}



Un résultat positif signifie que ces signes potentiels ont été détectés. Il est important de savoir qu'un résultat positif n'est **pas** la même chose qu'un diagnostic de cancer⁵

Des faux positifs et des faux négatifs peuvent se produire. Veuillez donc contacter votre professionnel de santé pour discuter des prochaines étapes⁵


Vous désirez encore plus d'informations ? Visitez Cologuard.com/UnderstandingResults pour obtenir des détails supplémentaires et regarder nos vidéos

Cologuard est facile à utiliser et **abordable**

Cologuard est couvert par Medicare et la plupart des grands assureurs. La plupart des patients assurés paient **0 \$***⁶

À l'échelle nationale, plus de **94 %** des utilisateurs de Cologuard ne paient aucun frais pour leur dépistage*⁶

*Estimation récente de Exact Sciences basée sur la facturation historique des patients.

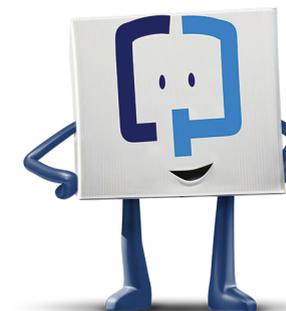

Pour en savoir plus au sujet des assurances, consultez Cologuard.com/insurance

Nous pouvons vous aider à contacter votre assureur pour lui poser les bonnes questions. Appelez-nous au **1-844-870-8870**



Détachez ce **rappel** pour vous aider à renvoyer votre kit Cologuard

et placez-le dans un endroit où vous gardez habituellement des pense-bêtes — comme votre salle de bain ou votre réfrigérateur.



Appelez le **1-844-870-8870*** ou **contactez nous par chat en direct sur Cologuard.com**

Regardez la vidéo **Comment utiliser sur Cologuard.com/use**

*Services d'interprétation disponibles dans plus de 200 langues

Veillez renvoyer votre kit au plus tard le :



Comment **utiliser** votre kit Cologuard



Une fois que vous aurez reçu votre kit, déballez-le et lisez le Guide du patient ci-joint



Placez votre récipient de collecte sur le siège des toilettes



Allez à la selle dans le récipient de collecte



Raclez votre échantillon à l'aide du tube



Ajoutez le conservateur dans le récipient de collecte



Assurez-vous de remplir les deux étiquettes



Il ne vous reste plus qu'à remettre la boîte d'expédition à UPS®. Consultez la page suivante de cette brochure pour obtenir des informations importantes sur l'expédition.

Expédition de votre **kit Cologuard**

Utilisez l'étiquette UPS® **prépayée** pour renvoyer le kit aux **Laboratoires Exact Sciences le jour même ou le lendemain de la collecte**

Assurez-vous qu'un dimanche ou un jour férié ne retardera pas le retour de votre échantillon

Vous pouvez choisir entre deux options de retour sans frais :

Option 1 :

Organisez une collecte UPS en ligne sur **Cologuard.com/UPS** ou appelez le **1-844-870-8870** pour plus de renseignements

Option 2 :

Déposez le kit chez UPS. Veuillez consulter **Cologuard.com/UPS** pour connaître les options locales et les heures de dépôt

Indications et informations importantes sur les risques

Cologuard est conçu pour le dépistage des adultes âgés de 45 ans et plus qui présentent un risque modéré de cancer colorectal, par la détection de certains marqueurs d'ADN et de sang dans les selles. À ne pas utiliser si vous avez eu des adénomes, si vous souffrez d'une maladie inflammatoire de l'intestin et de certains syndromes héréditaires, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal. Pour les patients à haut risque, Cologuard ne remplace pas la coloscopie. La performance de Cologuard chez les adultes de 45 à 49 ans est estimée sur la base d'une vaste étude clinique menée auprès de patients de 50 ans et plus.

Il convient d'interpréter le résultat du test Cologuard avec prudence. Un résultat de test positif ne confirme pas la présence d'un cancer. Les patients dont le résultat du test est positif doivent être invités à passer une coloscopie. Un résultat de test négatif ne confirme pas l'absence de cancer. Les patients ayant obtenu un résultat négatif doivent déterminer avec leur médecin à quel moment un nouveau test doit être envisagé. Des résultats faussement positifs et faussement négatifs sont possibles. Dans une étude clinique, 13 % des personnes sans cancer ont reçu un résultat positif (faux positif) et 8 % des personnes avec un cancer ont reçu un résultat négatif (faux négatif). Rx seulement.

Références :

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249. 2. Institut national du cancer. Génétique du cancer colorectal (PDQ®) - version destinée aux professionnels de santé. Consulté le 26 septembre 2022. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq> 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281. 4. Institut national du cancer. Données statistiques sur le cancer : cancer colorectal. Consulté le 26 septembre 2022. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 5. Exact Sciences. 2022. Brochure Cologuard pour les patients. 6. Exact Sciences. 2022. Données internes.

EXACT SCIENCES

cologuard®
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard est une marque déposée d'Exact Sciences Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2023 Exact Sciences Corporation. Tous droits réservés.
M-US-CG-03796-FR